



Científicamente probado

Los estudios in vivo confirman que **TKN Mesojectgun con la tecnología Pulse Booster®** permite que los ingredientes activos atraviesen la barrera del estrato córneo, garantizando una penetración más profunda y resultados clínicamente probados.

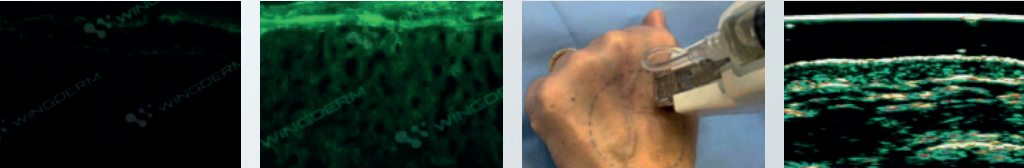

Detección de señal de fluorescencia sin aplicación de TKN Mesojectgun. Detección de señal de fluorescencia utilizando TKN Mesojectgun. Área de aplicación con TKN Mesojectgun. Detección de señal por ultrasonido 20 MHz en modelo ex vivo de oreja de cerdo, sin aplicación de TKN (Pitsill et al., 2023).

Resultados visibles

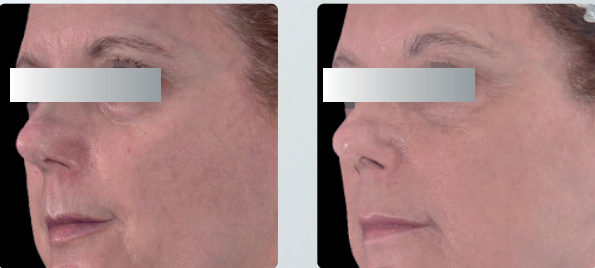

ANTES¹ DESPUÉS DE 5 SESIONES¹

Tratamiento antiedad¹
+43%
Firmeza



ANTES¹ DESPUÉS DE 10 SESIONES²

Tratamiento de hiperpigmentación²
-57,2%
Melanina



ANTES¹ DESPUÉS DE 8 SESIONES³

Tratamiento para la piel propensa al acne³
-65,5%
Sebo

1. Estudio de eficacia antiedad utilizando NCRP aplicado con TKN Mesojectgun. Estudio realizado en el Toskani Clinical Trial Center, Barcelona (2021), con 12 voluntarios, cada uno recibiendo un procedimiento cada dos semanas, para un total de 5 sesiones.
2. Estudio de eficacia en hiperpigmentación con Meso Star Kit Radiance aplicado mediante TKN Mesojectgun. Estudio realizado en el Toskani Clinical Trial Center, Barcelona (2022), con 10 voluntarios que recibieron un procedimiento por semana durante 10 semanas.
3. Estudio de eficacia para piel con tendencia acneica con Purifying Cocktail aplicado mediante TKN Mesojectgun. Estudio realizado en el Toskani Clinical Trial Center, Barcelona (2021), con 5 voluntarios que recibieron un procedimiento por semana durante 3 semanas.

TKNmesojectgun

Datos técnicos

Sistema	
Pulse Booster	1-5 niveles
Grado de contacto	1-5 niveles
Volumen de dosificación	1-5 niveles
Frecuencia	2 kHz
Parámetros preconfigurados	Sí

Cabezal	
Área de contacto	F: 25 canales / H: 22 canales
Área de contacto del cabezal	F: 13 x 18 mm / H: 13 x 12,5 mm
Área del cabezal	F: 8,2 x 8,2 mm / H: 5,5 x 8,6 mm

Dispositivo	
Dimensiones del dispositivo (L x An x Al)	30,2 x 27,2 x 12,6 cm
Dimensiones del embalaje interno (L x An x Al)	33 x 33 x 20 cm
Dimensiones del embalaje (L x An x Al)	38 x 38 x 27 cm
Peso neto del dispositivo	2,5 kg
Peso bruto	4 kg
Adaptador de corriente	Salida: 12 V 4 A Interfaz de salida: 55,5 x 2,5 mm
Cable de alimentación	Enchufe de 10 A con adaptador

TOSKANI

www.toskani.com




TOSKANI

TKNmesojectgun

La evolución inteligente de la difusión transdérmica

Sin agujas, indoloro y clínicamente probado

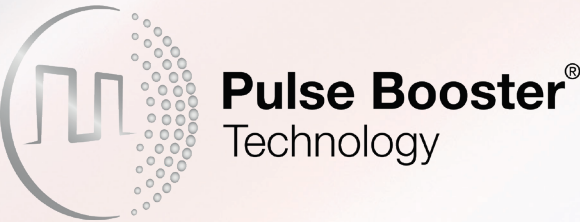

La evolución inteligente de la difusión transdérmica


■TKNmesojectgun

Sin agujas, indoloro y clínicamente probado.

El dispositivo de nueva generación para la administración transdérmica de productos con ingredientes activos, que garantiza la máxima eficacia sin las molestias de las inyecciones.

Sin agujas, indoloro y sin tiempo de recuperación. Resultados visibles desde la primera sesión.

TKN mesojectgun, con tecnología Pulse Booster®, introduce productos con ingredientes activos en la piel, garantizando una penetración más profunda y una absorción controlada.

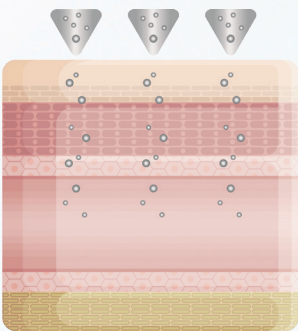


¿Por qué elegir TKN mesojectgun?

- **SEGURO Y NO INVASIVO**
Sin agujas, sin heridas, sin hematomas y sin tiempo de recuperación. Los pacientes disfrutan de comodidad y confianza.
- **TECNOLOGÍA PULSE BOOSTER®**
Innovación exclusiva de TOSKANI que utiliza pulsos eléctricos suaves y modulados para abrir microcanales en la piel, mejorando la penetración de los ingredientes de forma segura y eficaz.
- **RESULTADOS VISIBLES Y PROBADOS**
Estudios in vivo confirman hasta un **+43% de firmeza de la piel** y un **-61% de reducción del sebo** tras solo 5 sesiones.*
- **TRATAMIENTOS VERSÁTILES**
Un solo dispositivo para **protocolos faciales, corporales y capilares**: antiedad, piel con tendencia acnéica, pigmentación, hidratación, luminosidad y revitalización del cuero cabelludo.
- **INVERSIÓN INTELIGENTE**
Consumibles mínimos, rápido retorno de la inversión y tratamientos repetibles que generan ingresos continuos.
- **FACILIDAD DE USO**
Interfaz con pantalla táctil, pieza de mano ergonómica y configuración sencilla para uso profesional en entornos clínicos.

La ciencia detrás de ello

La **tecnología Pulse Booster®** aplica pulsos eléctricos suaves y controlados con precisión sobre la piel, mejorando la penetración de productos con ingredientes activos y garantizando al mismo tiempo seguridad y confort.

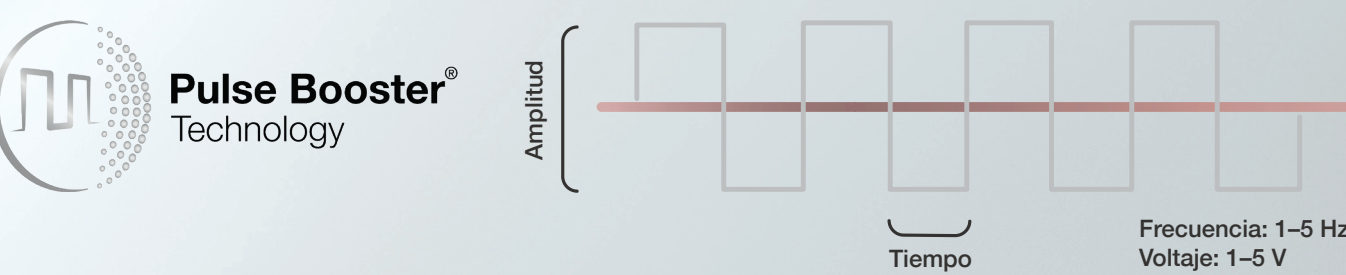

PRECISIÓN DE ONDA CUADRADA	POTENCIA DE FRECUENCIA MEDIA	SEGURIDAD DE BAJO VOLTAJE
Pulsos constantes y homogéneos garantizan una administración uniforme y una absorción óptima de los ingredientes activos en la dermis.	Ondas específicas de frecuencia media penetran más profundamente en la piel, asegurando resultados visibles y duraderos.	El bajo voltaje ajustable acelera la recuperación de los tejidos y evita molestias, proporcionando un tratamiento completamente indoloro.

Opciones de tratamiento

TRATAMIENTOS INDEPENDIENTES	CON PRODUCTOS TOSKANI.
TRATAMIENTOS 360°	COMBINA TKN MESOJECTGUN CON OTRAS TECNOLOGÍAS AVANZADAS.

■ TRATAMIENTOS 360° - Soluciones integrales:

El enfoque holístico de TOSKANI integra:


1. **Preparación de la piel** – peelings avanzados.
2. **Tratamiento transdérmico** – con TKN mesojectgun y cocktails de activos específicos.
3. **Mantenimiento en casa** – cosméticos y complementos nutricionales para prolongar los resultados.

Un protocolo completo para **transformaciones visibles y duraderas**.

Tecnología de microchip inteligente para resultados superiores

Rendimiento de doble acción

- **Electroestimulación:** Los electrodos del microchip transmiten la corriente Pulse Booster®, creando canales superficiales controlados que mejoran la penetración de productos con ingredientes activos.
- **Microabrasión:** La suave estimulación superficial mediante microprotuberancias centrales favorece la renovación y optimiza la absorción.

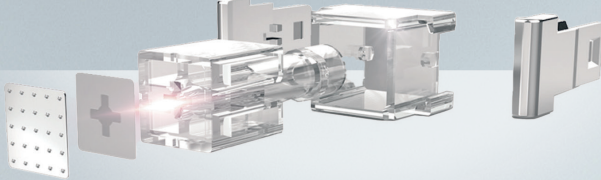

Eficiencia de corriente alterna

El diseño único integra **electrodos principales y secundarios**, permitiendo la administración de productos con ingredientes activos independientemente de la polaridad, garantizando resultados precisos y eficaces.


Microchips a medida

- **MESOSKIN DISPOSABLE | 25 canales** – específicamente diseñado para tratamientos faciales y corporales.
- **MESOHAIR DISPOSABLE | 22 canales** – diseñado para protocolos capilares.

Cada aplicador cuenta con **acabado láser, envasado individualmente en condiciones estériles y un diseño ergonómico** que garantiza máxima seguridad e higiene.

Un dispositivo, infinitas posibilidades

- Líneas de expresión y arrugas
- Flacidez cutánea y pérdida de firmeza
- Hiperpigmentación
- Marcas postacné
- Piel deshidratada o apagada
- Protocolos capilares
- Rejuvenecimiento global de la piel

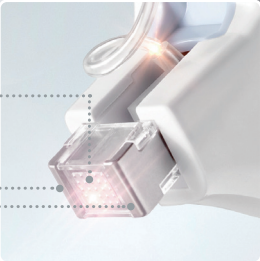

ELECTRODOS SECUNDARIOS

ELECTRODOS PRINCIPALES